


14. POBIERANIE WYCISKU METODĄ OTWARTĄ BEGO SEMADOS® S/RI SUPRA-DENT

14.1 Pobieranie wycisku implantów metodą otwartą - zestaw Supra-Dent

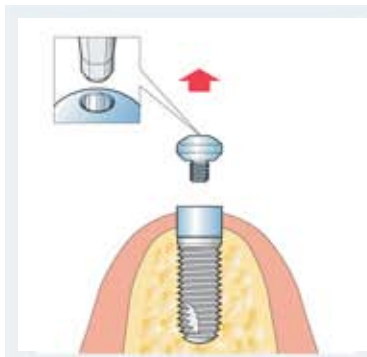


Odkręcenie śruby zamykającej tulejkę dystansową

Śrubę zamykającą tulejkę dystansową wykręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Tulejkę dystansową przed umieszczeniem transferu wyciskowego Supra oczyścić z krwi i resztek tkanki.


Kontrola

Sprawdzić, czy tulejka dystansowa dokładnie przylega do implantu (w razie potrzeby wykonać kontrolne zdjęcie rentgenowskie) sprawdzić moment dokręcania (moment obrotowy) przy pomocy klucza dynamometrycznego BEGO Semados® (moment obrotowy: 30Ncm) (narzędzie: śrubokręt krzyżakowy)

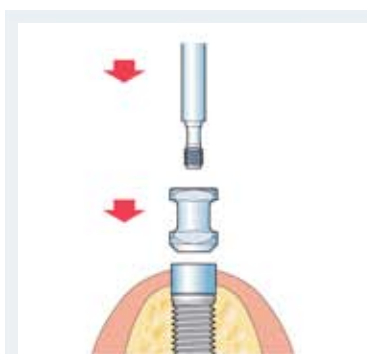

Montaż transferu wyciskowego Supra


Transfer wyciskowy Supra umieścić na tulejce dystansowej i przykręcić śrubą tytanową L11 lub L16 zgodnie z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny/ śrubokręt płaski). Sprawdzić szczelność (w razie potrzeby wykonać zdjęcie rentgenowskie).

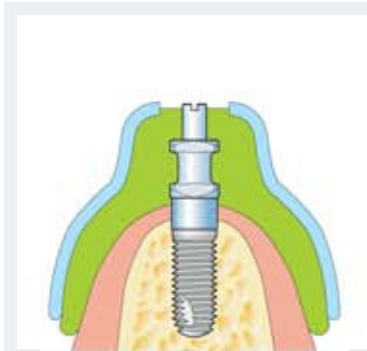

Pobranie wycisku


Dokonać przymiarki łyżki indywidualnej i w razie potrzeby dopasować otwory na śruby tytanowe L11 lub L21. Otwory w łyżce zamknąć płytką wosku, aby zapobiec wypływaniu masy wyciskowej. Zablokować duże podcienie w łuku zębowym (np. przęsła mostu). Do pobierania wycisku należy użyć masy silikonowej lub polieterowej z dobrą zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu (nie należy używać mas hydrokoloidalnych).

14.1 Pobieranie wycisku implantów metodą otwartą - zestaw Supra-Dent

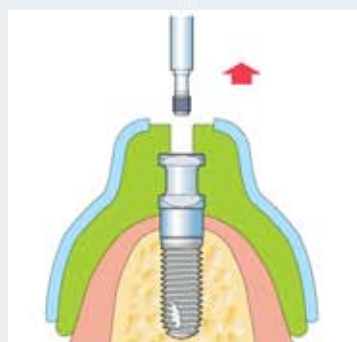


Odkręcenie śruby tytanowej L11/L16

Uwaga: Po związaniu materiału wyciskowego (przestrzegać zaleceń producenta) należy najpierw odkręcić śrubę tytanową L11 lub L16 wykręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a dopiero potem uwolnić wycisk z jamy ustnej (narzędzie klucz sześciokątny 1,25 mm/ śrubokręt płaski).

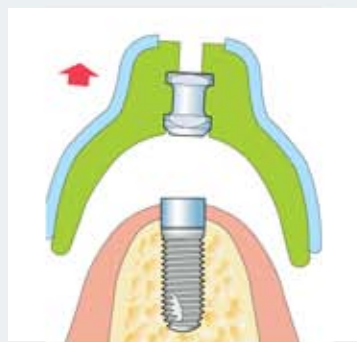

Uwalnianie wycisku z jamy ustnej


Transfer wyciskowy Supra pozostaje w materiale wyciskowym i wraz z masą wyciskową zostaje wyjęty bezpośrednio z jamy ustnej. Razem z modelem tulejki dystansowej przekazany technikowi dentystycznemu. Tulejka dystansowa pozostaje w jamie ustnej pacjenta.

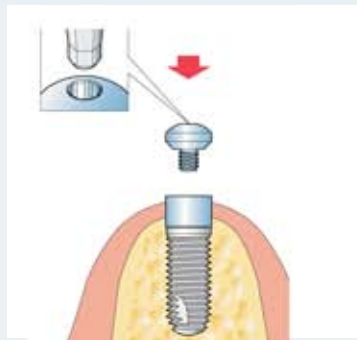

Założenie śruby zamykającej tulejkę dystansową

Przykręcić śrubę zamykającą tulejkę dystansową zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (dokręcić ręcznie/10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm).

14.2 Wykonanie modelu z wycisku metodą otwartą - zestaw Supra-Dent

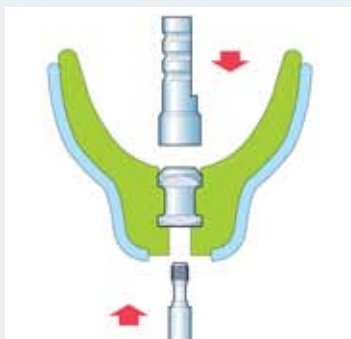

Montaż modelu tulejki dystansowej

Model tulejki dystansowej i transfer wyciskowy przykręcić śrubą tytanową L11 lub L16 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie /10 Ncm). (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/śrubokręt płaski). Zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie (szczelność) oraz zdolność materiału wyciskowego powrotu do pierwotnego kształtu (przestrzegać zaleceń producenta). Ze względu na elastyczność materiału należy odczekać około 2 godzin. Skutkiem nieprzestrzegania tych zasad może być niedokładnie wykonany model.

Podczas przykręcania model tulejki dystansowej należy przytrzymać kleszczami, aby transfer wyciskowy nie obkręcił się w wycisku.


W przypadku stosowania systemu BEGO Semados® Supra nie trzeba koniecznie używać maski dziąsłowej.



Wykonanie modelu


Model należy wykonać standardową metodą stosując tylko i wyłącznie gips 4 klasy twardości (DIN 6873) lub precyzyjne tworzywo sztuczne. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.

13.2 Wykonanie modelu z wycisku pobranego metodą zamkniętą Supra-Dent

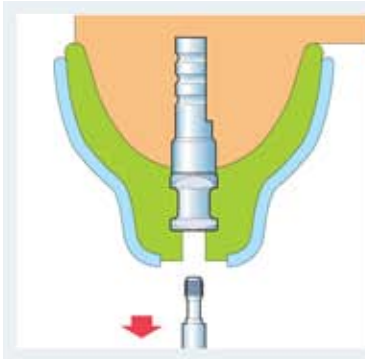

Odkręcenie śruby tytanowej L11/L16

Wycisk należy uwolnić dopiero po związaniu materiału użytego do wykonania modelu. Poluzować śrubę tytanową L11 lub L16 wykręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/ śrubokręt płaski). Następnie wyjąć ją z łyżki wyciskowej.

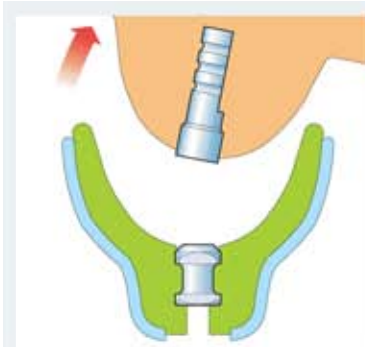

Uwalnianie modelu z wycisku

Zdjąć łyżkę wyciskową z modelu. Transfer wyciskowy Supra pozostaje w łyżce wyciskowej.