


17. POBIERANIE WYCISKU


²LOCATOR® BEGO SEMADOS® S/RI

17.1 Pobieranie wycisku - ²Locator®

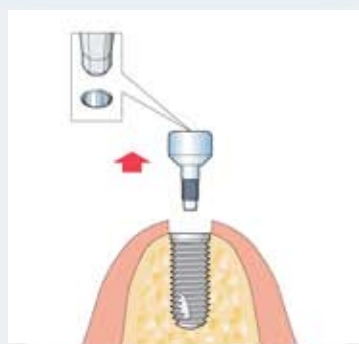

Odkręcanie śruby gojącej

Śrubę gojącą wykręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Przed umieszczeniem łącznika Sub-Tec ²Locator® należy oczyścić implant z krwi i resztek tkanki.

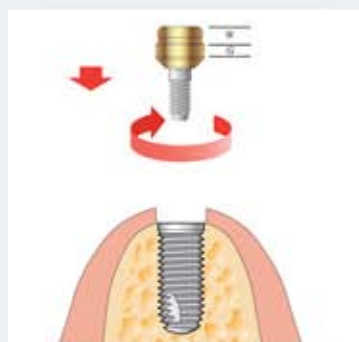


Montaż łącznika Sub-Tec ²Locator®

Określić wcześniej wysokość dziąsła, aby dobrać odpowiedni łącznik Sub-Tec ²Locator®. Obszar retencyjny (R) nie powinien w żadnym przypadku znajdować się poniżej dziąsła (G). ²Locator® dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara (moment obrotowy: 30Ncm) (narzędzie: klucz ²Locator®). Sprawdzić szczelność łącznika (w razie potrzeby wykonać kontrolne zdjęcie rentgenowskie).



Montaż czapeczki do wycisków ²Locator®

Czapeczkę do wycisków ²Locator® należy nałożyć na łącznik Sub-Tec ²Locator®. Sprawdzić prawidłowe dopasowanie.

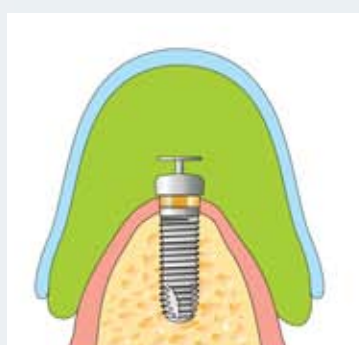


Pobranie wycisku

Dokonać przymiarki łyżki indywidualnej lub istniejącej protezy i w razie potrzeby dopasować lub zmienić. W przypadku niewielkiej płyty protezy można zastosować także czapeczki retencyjne z zestawu laboratoryjnego ²Locator® w połączeniu z wkładką roboczą ²Locator®. (Uwaga: zmniejszona retencja w masie wyciskowej). Do pobierania wycisku należy użyć masy silikonowej lub polieterowej z dobrą zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu (nie należy używać mas hydrokoloidalnych).




Uwalnianie wycisku z jamy ustnej

Usunąć łyżką wyciskową z jamy ustnej. Czapeczka do wycisków ²Locator® pozostaje w materiale wyciskowym.

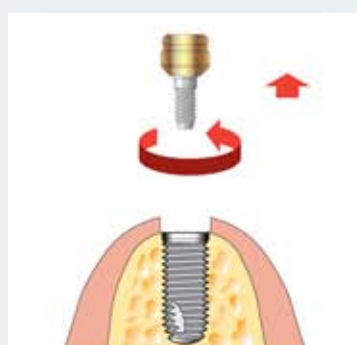

Odkręcenie łącznika Sub-Tec ²Locator®


Wykręcić łącznik Sub-Tec ²Locator® w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odłożyć w bezpieczne miejsce. (narzędzie śrubokręt do łącznika ²Locator®)

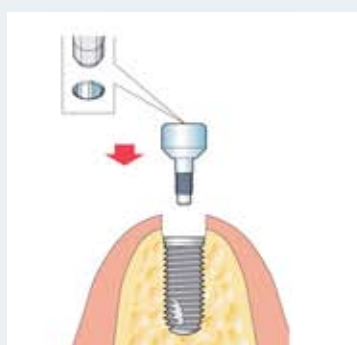

Założenie śruby gojącej


Wkręcić śrubę gojącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara (dokręcić ręcznie /10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm).

17.2 Wykonywanie modelu z czapeczką ²Locator®

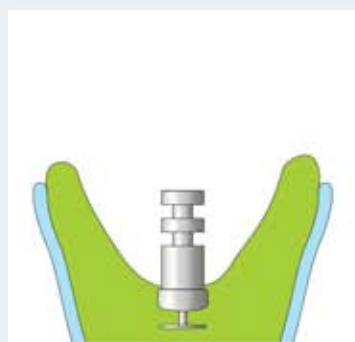


Montaż analogu ²Locator®

Analog ²Locator® umieścić w czapeczce do wycisków ²Locator®/ czapeczce retencyjnej ²Locator® (z zestawu laboratoryjnego ²Locator®). Sprawdzić odpowiednie dopasowanie (szczelność) oraz zwrócić uwagę na zdolność powrotu materiału wyciskowego do pierwotnego kształtu (przestrzegać zaleceń producenta). Ze względu na elastyczność materiału należy odczekać około 2 godzin. Skutkiem nieprzestrzegania tych zasad może być niedokładnie wykonany model.

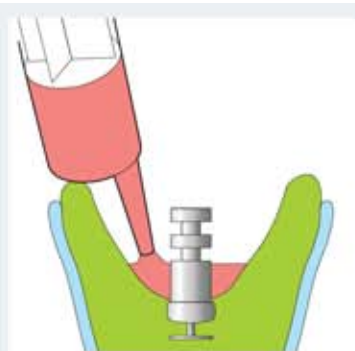


Wykonanie maski dziąsłowej (opcja)

Wykonać maskę dziąsłową zgodnie z zaleceniami producenta materiału. Zaleca się używanie silikonu addycyjnego, aby móc przechowywać modele przez dłuższy okres czasu.

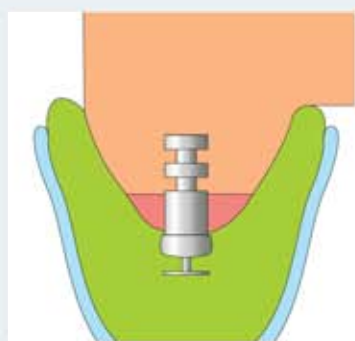

Wykonanie modelu

Model należy wykonać standardową metodą stosując tylko i wyłącznie gips 4 klasy twardości (DIN 6873) lub precyzyjne tworzywo sztuczne. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.

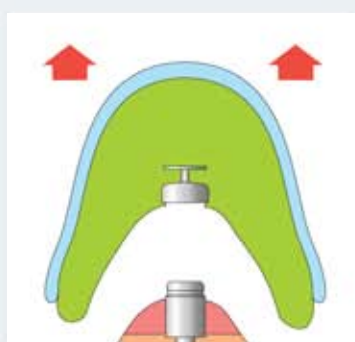

Uwalnianie wycisku z modelu

Wycisk uwolnić z modelu dopiero po całkowitym stwardnieniu materiału użytego do wykonania modelu (przestrzegać zaleceń producenta). Zdjąć łyżką wyciskową z modelu. Czapeczka do wycisków ²Locator® pozostaje w wycisku. W przypadku stosowania czapeczek retencyjnych ²Locator® z zestawu laboratoryjnego należy je usunąć z wycisku, oczyścić i przechowywać w bezpiecznym miejscu do ponownego użycia.