

MINISTAR ®

SCHEU
Dental Technology

Uniwersalne urządzenie do termoformowania.

Kompaktowe wymiary, duże możliwości.

przejrzysty i duży wyświetlacz

funkcja skanowania zapewnia szybkie programowanie

Temperatura robocza w ciągu 1 sekundy

ciśnienie robocze 4 bar

Wraz ze sprzętem oferujemy jego uruchomienie oraz przeszkolenie oraz użytkownika

Oferujemy ponadto szkolenia i kursy w zakresie wykonywania prac ortodontycznych techniką termoformowania ciśnieniowego

opatentowany system kontroli grzania

rynną do szybkiego zbierania granulatu

ergonomiczny kontener na granulát



Temperatura robocza w ciągu 1 sekundy!

Urządzenie MINISTAR S osiąga temperaturę roboczą natychmiastowo po zeskanowaniu kodu oraz przesunięciu nagrzewnicy nad materiał.

Jak wszystkie urządzenia do termoformowania firmy Scheu Dental, urządzenie nagrzewa tą stroną materiału, która jest zwrócona w kierunku podczas termoformowania. Z wykorzystaniem ciśnienia 4 bar oraz nagrzaniu powierzchni kontaktu do temperatury wyższej o ok. 60°C gwarantowane jest doskonałe precyzyjne efekty tłoczenia, od najcieńszego materiału aż do materiału o grubości ok. 5 mm. Nagrzewnica posiadająca opatentowane sterowanie termostatyczne, zapewnia zawsze stałe efekty pracy. W efekcie dzięki równomiernie nagrzewanym folii/plytkom osiąga się takie same efekty.



Duży i czytelny wyświetlacz

Za pomocą klawiatury foliowej są programowane i kontrolowane wszystkie parametry pracy, które są wyświetlane na dużym ekranie. Ciśnienie robocze jest pokazane na wyświetlaczu podczas procesu termoformowania. Sygnały wizualne oraz dźwiękowe wspierają obsługę podczas pracy np. informuje o zakończeniu czasu nagrzewania. Po zamknięciu komory ciśnieniowej automatycznie uruchamiany jest proces chłodzenia i jego zakończenie sygnalizowane jest optycznie przy zastosowaniu diod LED na wyświetlaczu oraz dźwiękami akustycznymi. Przycisk AIR uruchamia szybkie napowietrzenie komory.

MINISTAR ®




Ergonomiczny zbiornik na granulaty

Ergonomicznie zaprojektowany kontener na granulaty jest łatwy do chwycenia oraz umożliwia kontrolowane i precyzyjne umieszczenie modelu i zasypywanie go granulatem. Zbędny nadmiar granulatu spada do rynny, z której w prosty sposób można powrócić do kontenera i może być natychmiast ponownie użyty.



Komfortowa obsługa

Powiększony garnek na model umożliwia osadzenie modeli w artykulatorze. Załączona do urządzenia pokrywa do wielokrotnego użytku na granulaty, zapobiega przywieraniu granulatu do nagrzanego i miękkiego materiału. W razie potrzeby oprogramowanie można zaktualizować poprzez interfejs.

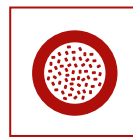

Skanywanie z natychmiastowym programowaniem

Pełne informacje, takie jak temperatura, czasy nagrzewania i chłodzenia, są bezpośrednio ustawiane po zeskanowaniu kodu znajdującego się na produktach Scheu Dental. Ergonomiczny kształt skanera zapewnia najwyższą prostotę użycia. Dzięki stosowaniu funkcji skanowania unika się popełniania błędów podczas programowania czy wyboru nieprawidłowego materiału. Wszystkie żądane informacje dotyczące parametrów pracy mogą być wprowadzone ręcznie.

MINISTAR S[®]



Szeroka oferta płytek i folii do termoformowania

Oferujemy odpowiedni materiał do każdego zastosowania w termoformowaniu. Produkty do termoformowania są przetestowane pod względem biologicznym i spełniają wymagania międzynarodowej normy DIN EN ISO 10993 oraz 7405 i zostały dopuszczone do celów klinicznych. Kod kreskowy na każdej płytce zapewnia proste, łatwe i bezpieczne stosowanie.



**DENON
DENTAL**

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Denon Dental Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 49, 05-520 Kostancin - Jeziorna

telefon: + 48 22 717 58 70 denon@dental.pl

www.dental.pl