




## Gumki, krążki i instrumenty do polerowania

Firma Edenta oferuje narzędzia, instrumenty precyzyjne i gumki do najnowocześniejszych metod obróbki materiałów. W ofercie znajdują się specjalne gumki, instrumenty frez przeznaczone do obróbki różnych materiałów - o parametrach dopasowanych do specyfiki materiałów.

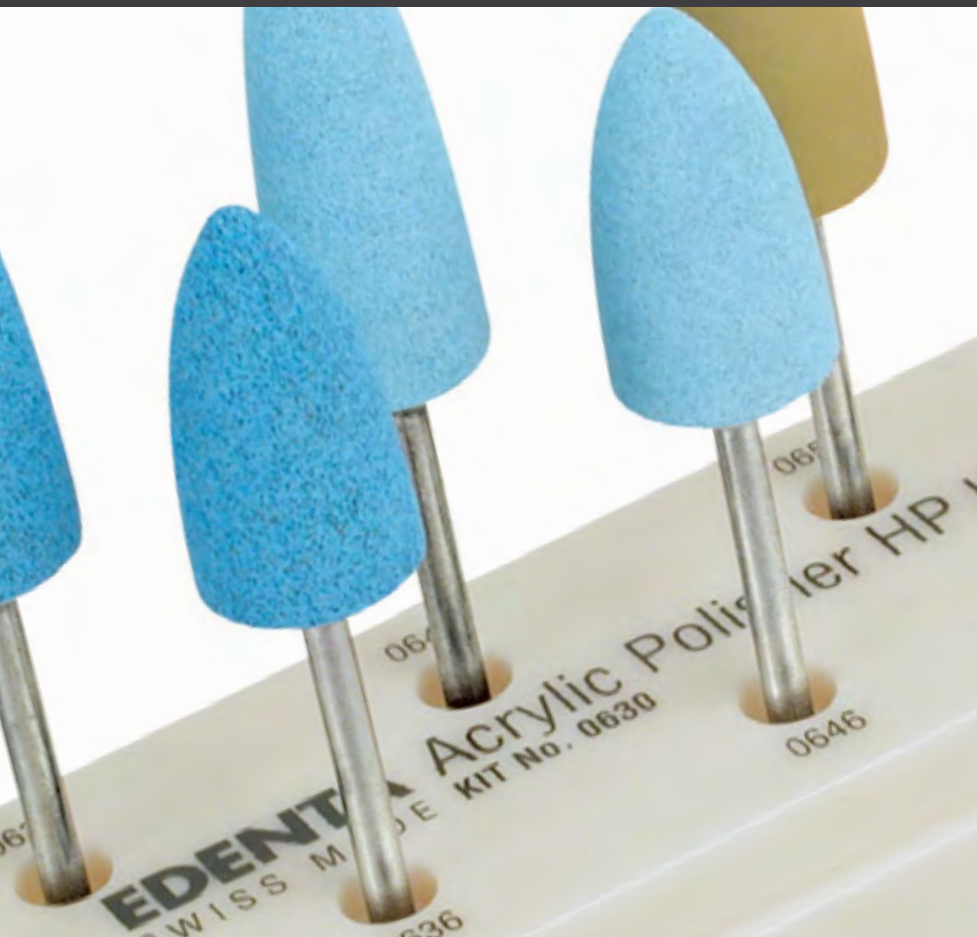

### Krążki i walce

**Chromopol** do stopów szlachetnych i nieszlachetnych,

**NE polisher** do obróbki metali nieszlachetnych



**NE Polisher**  
1020UM

**Chromopol**  
0205UM

maks. 20 000 obr./min.


### SteelProfi

**Elastyczne krążki polerskie do polerowania stopów chromowo-kobaltowych**

Posiadają dwa stopnie ścieralności dla optymalnego wygładzania powierzchni koron, mostów i protez szkieletowych wykonanych ze stopów chromo-kobaltowych.

**1 etap - Czarny** - standardowe polerowanie, usuwa rysy i wygładza powierzchnię.

**2 etap - Zielony** - dokładne polerowanie powierzchnia nabiera lekkiego blasku, przygotowuje do ostatecznego polerowania.

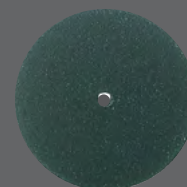

1301UM

1405UM

maks. 20 000 obr./min.

## Exa Technique do obróbki akrylu

3 stopniowy system obróbki protez i aparatów ortodontycznych wykonanych z akrylu.

**1 stopień** - obróbka wstępna (gruba ziarnistość) - kolor zielony gumki silikonowe do wykończenia i konturowania. Usuwa zadrapania i wygładza powierzchnię akrylu.

**2 stopień** - polerowanie (średnia ziarnistość) - kolor szary gumki silikonowe do wygładzania i wycieniania powierzchni materiału. Tworzy lekki połysk. Do wstępnego polerowania.


**3 stopień** - polerowanie na wysoki połysk (drobna ziarnistość) - kolor żółty gumki silikonowe do ostatecznego wygładzania i wycieniania akrylu.



0654HP	0655HP	0656HP	0667HP	0675HP	0676HP	BR03UM
max 5.000 - 7.000 obr./min.			max 10.000 - 15.000 obr./min.			

## Occlupol gumki do metalu


Gumki do obróbki powierzchni zużywających i trudnodostępnych miejsc. Przeznaczone do wszystkich stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych.

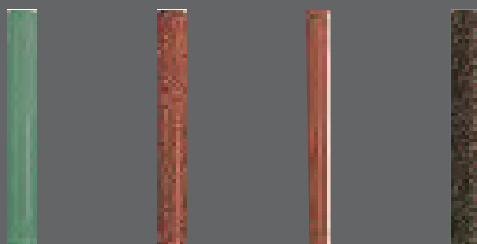

1103UM	1102UM	11002UM	1100UM
maks. 20 000 obr./min.			

## Exa Dental uniwersalne

Uniwersalne krążki polerskie z silikonu, przeznaczone do wszystkich stopów: szlachetnych, nieszlachetnych, chromo-kobaltowych i tytanu. Idealne do polerowania przejścia pomiędzy ceramiką a metalem. Tworzy na metalu długotrwały połysk.

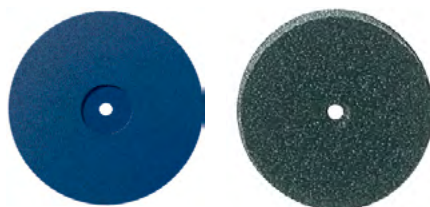


0410UM	0401UM
maks. 10 000 obr./min.	maks. 20 000 obr./min.



## Exa Cerapol / Cerapol Super gumki do ceramiki

do polerowania końcowego wszystkich koron ceramicznych, w tym prac pełnoceramicznych.

### Cerapol Super

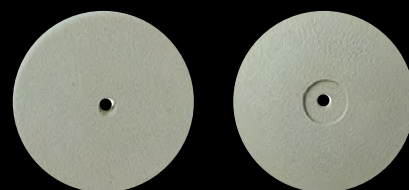

0321UM	0322UM
maks. 5.000 obr./min.	

### Exa Cerapol



0306UM	0316UM
maks. 10 000 obr./min.	

### Exa Cerapol



0310UM	0301UM
maks. 20 000 obr./min.	

